

**NSK**

IPEX ОТ КОМПАНИИ NSK

**ЦИФРОВОЙ АПЕКСЛОКАТОР****iPex**

# МГНОВЕННОЕ И ТОЧНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ



Новый усовершенствованный цифровой апекслокатор от NSK разработан для точного измерения длины канала в любых средах, включая сухие, влажные или при наличии крови в канале.



Powerful Partners®




## Точный цифровой апекслокатор

Новый усовершенствованный цифровой определитель верхушки корня (апекслокатор) от NSK точно измеряет длину любого корневого канала и исключает недостатки, имеющиеся в аналогичных приборах. Технология многочастотного измерения апекслокатора iPex фильтрует посторонние сигналы, возникающие в нелинейных каналах, и прочие нестандартные сигналы. iPex автоматически выбирает наилучшие комбинации частот в соответствии с состоянием корневого канала пациента.

- Мгновенные точные измерения длины канала
- Удобный для пользователя интерфейс
- Большой ЖК-дисплей для удобного мониторинга
- Компактная и интеллектуальная конструкция
- Звуковая система предупреждения
- Автоматическое отключение питания
- Питание от аккумуляторных батарей AAA
- Отсутствие необходимости ручной калибровки

## Большой экран в сочетании со звуковыми сигналами для точного измерения

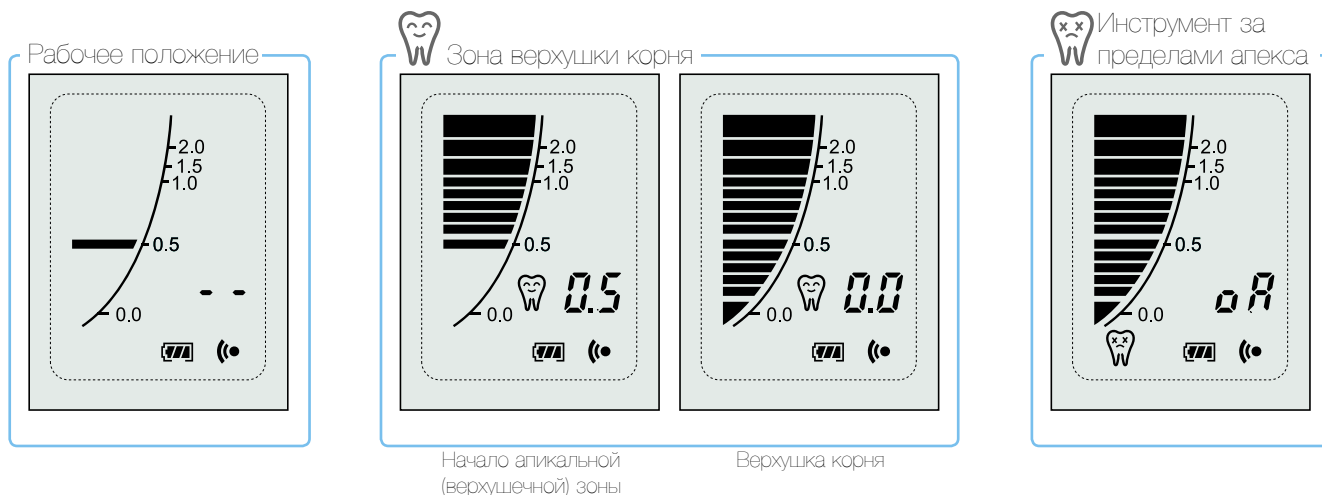

## Полный комплект iPex

МОДЕЛЬ КОД ЗАКАЗА

iPex	Y141-251
------	----------

### Комплектация

- Блок управления
- Зонд
- Держатель файла (3 шт.)
- Загубник (3 шт.)
- Удлинительный кабель
- Аккумуляторные батареи AAA (4 шт.)

### Технические характеристики

- Питание: для 1,5В батарей AAA (LR03 или R03)
- Непрерывная работа: примерно 50 часов
- Размеры: Ш180 x Д80 x В95 мм
- Вес блока: 185 г



Держатель файла, загубник и удлинительный кабель можно автоклавать при 135 °С.

**NAKANISHI INC.**  
www.nsk-inc.com

700 Shimohinata Kanuma-shi  
Tochigi 322-8666,  
Japan  
TEL : +81 (0)289-64-3380  
FAX : +81 (0)289-62-5636

**NSK Rus & CIS**

www.nsk-russia.ru

115114, Россия, Москва  
Дербеневская наб., 7 стр. 16,  
3 этаж  
ТЕЛ: +7 (495) 967-96-07  
ФАКС: +7 (495) 967-96-08