



# M40 XS

Суперкомпактный электромотор с оптикой LED



Powerful Partners®

# M40 XS С оптикой / Без оптики

Электромотор с внутренней системой подачи охлаждения


Микромотор M40 XS от NSK создан по улучшенной бесколлекторной технологии и работает от постоянного тока. Использование данной технологии обеспечивает плавную и бесшумную работу, мощный крутящий момент и минимальный нагрев мотора M40 XS, несмотря на его компактный размер.

## Основные характеристики

- Бесшумная плавная работа на скорости от 60 до 40 000 об/мин
- Минимальный нагрев инструмента
- Компактный и легкий бесколлекторный электрический микромотор
- Светодиод LED, встроенный в микромотор (M40 XS)
- Титановый корпус с покрытием против царапин DURACOAT

## Еще короче и легче для оптимально баланса

Микромотор M40 XS примерно на 10 процентов короче и легче, чем предыдущие модели. Благодаря этому он прекрасно сбалансирован и так же прост в обращении, как и воздушная турбина. Его титановый корпус имеет повышенную устойчивость к царапинам, износу и постоянному автоклавированию.

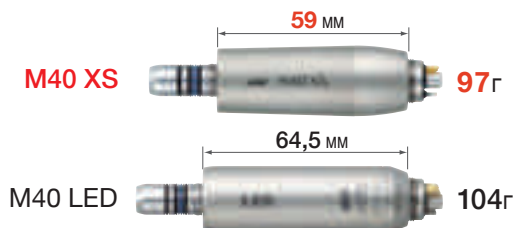

## Преимущества использования – оптика LED


**Высококачественное освещение:** LED излучает дневной свет, обеспечивающий лучшую видимость, чем свет от галогенной лампы.

**Надежность:** Светодиод LED имеет больший срок службы и более надежен по сравнению с галогенными лампами.



## Эргономичная форма

Эргономичный дизайн корпуса M40 XS обеспечивает соединение с угловым наконечником без стыков, создавая ощущение продолжения руки. Такая форма корпуса способствует естественному захвату инструмента даже во время проведения самых тонких хирургических процедур.

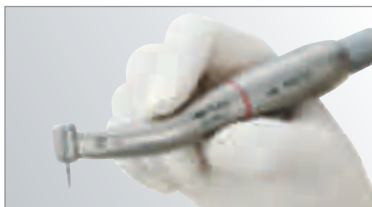

## Микромотор




**С оптикой** модель: M40 XS    КОД ЗАКАЗА: E1135051

**Без оптики** модель: M40N XS    КОД ЗАКАЗА: E1136051

## Подсоединение напрямую к шлангам:

- Bien-Air® 4VLM
- Bien-Air® 4VR 400
- Bien-Air® B4VLR

M40 XS →

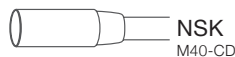

NSK  
M40-CD



Bien-Air®  
4VLM / 4VR 400 / B4VLR

(Производится компанией Bien-Air Dental S.A.)  
Bien-Air® - зарегистрированная торговая марка Bien-Air Dental S.A.



**NAKANISHI INC.**  
www.nsk-inc.com

700 Shimohinata  
Kanuma-shi  
Tochigi 322-8666,  
Japan  
TEL : +81 (0)289-64-3380  
FAX : +81 (0)289-62-5636

**NSK Rus & CIS**  
www.nsk-russia.ru

115114, Россия, Москва  
Дербеневская наб., 7,  
стр.16, 3-й этаж.  
ТЕЛ.: +7 (495) 967-96-07  
ФАКС: +7 (495) 967-96-08